



- 1- Pacs Sistemine giriş yaptınız, aramak istediğiniz hastayı listelediniz. YÜKLE butonuna bastıktan sonra ietab butonuna bastınız (Resim 1)

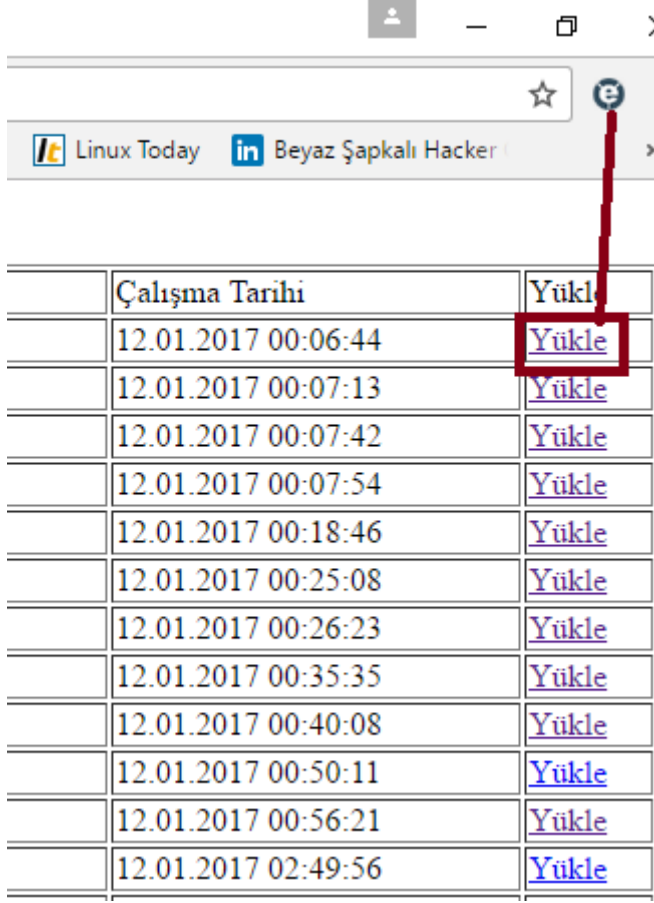


Çalışma Tarihi	Yükle
12.01.2017 00:06:44	Yükle
12.01.2017 00:07:13	Yükle
12.01.2017 00:07:42	Yükle
12.01.2017 00:07:54	Yükle
12.01.2017 00:18:46	Yükle
12.01.2017 00:25:08	Yükle
12.01.2017 00:26:23	Yükle
12.01.2017 00:35:35	Yükle
12.01.2017 00:40:08	Yükle
12.01.2017 00:50:11	Yükle
12.01.2017 00:56:21	Yükle
12.01.2017 02:49:56	Yükle

Resim -1

- 2- Akabinde aşağıda ekran görüntüsünde yer alan uyarıyı alacaksınız. Sarı arkaplan renkli uyarının üzerine gelip sağ tıklayıp “ Bu eklentiyi bu bilgisayardaki tüm kullanıcılar için yükle” seçeneği seçilmelidir. (Resim 2)

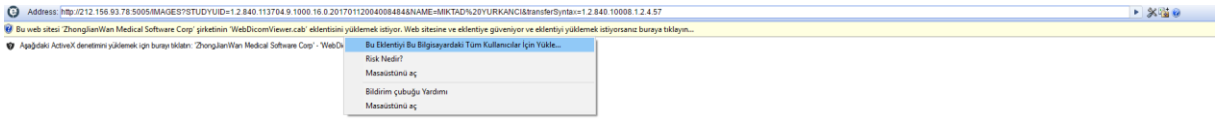

Resim -2

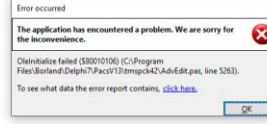

Resim -3

3- WebDicomViewer.Ocx dosyası indirdikten sonra Resim -3 'te yer alan hatayı alırsanız:

a- Web sitesinde PACS arayüzüne giriş yaptığımız sayfaya gelinip Webdicomviewer.ocx dosyası indirilir. (Resim-4)



1- Pacs Sistemi Web Arayüzüne Erişmek İçin [Tıklayınız](#)


2- Mobil Pacs Sistemine Erişmek İçin [Tıklayınız](#)

3- Pacs Sistemi Kullanım Kılavuzu İçin [Tıklayınız](#)


4- Webviewer Dosyası İçin [Tıklayınız](#)

Resim -4

- b- “Tıklayınız “ linkine tıklayınca .rar uzantılı dosya inecektir.rar dosyasını masaüstüne çıkartalım. İçerisinde yer alan “WebDicomViewer.ocx” dosyasını kopyalayıp C dizinine (C:\) yapıştıralım.(Resim -5 ve Resim -6)

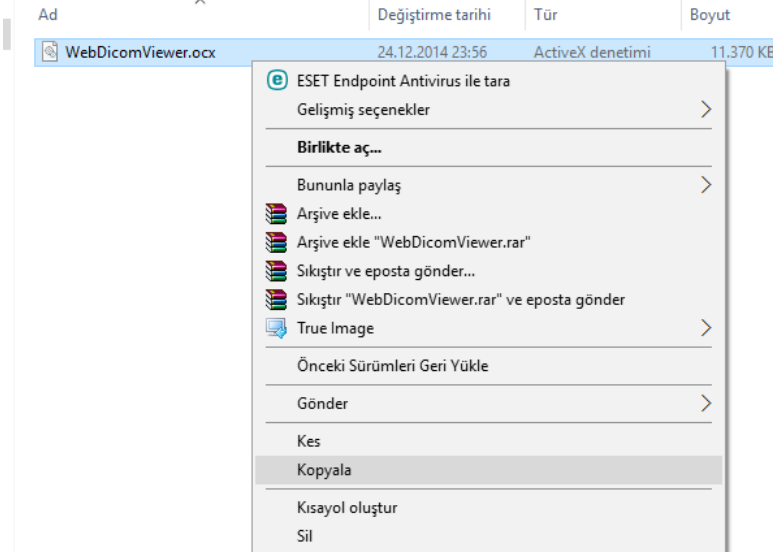


Resim 5

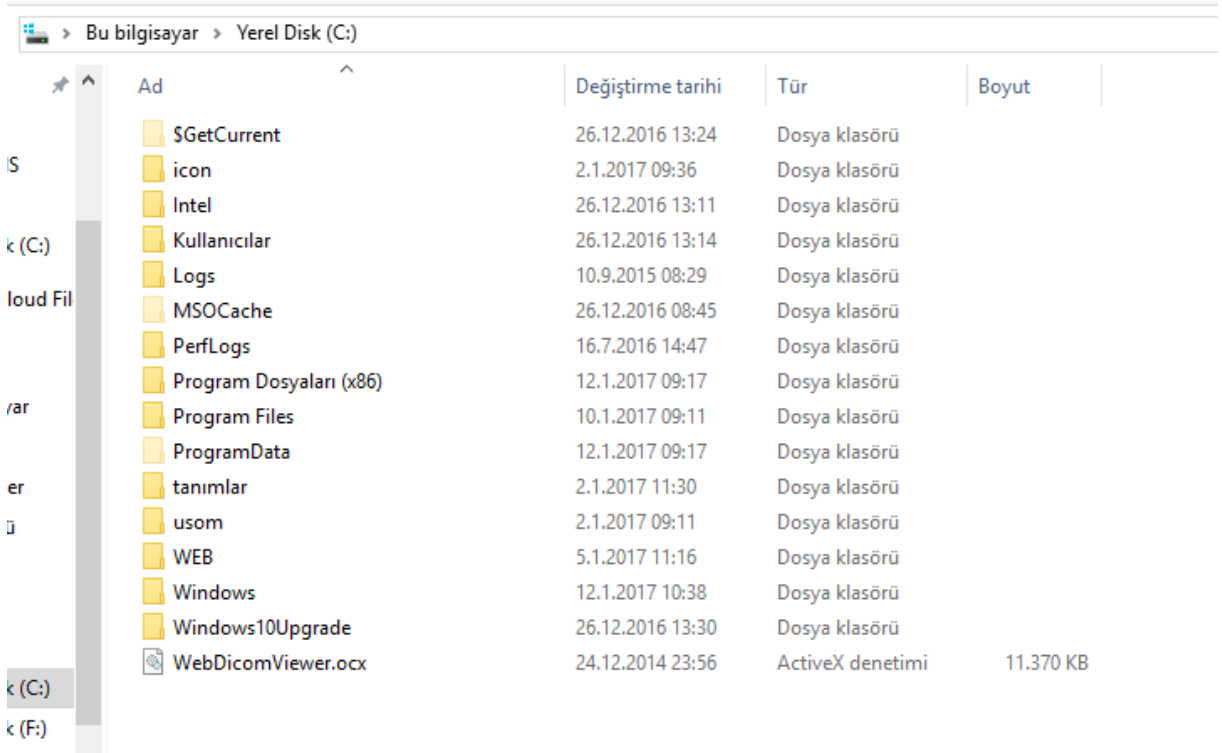


Resim 6

- c- Arama çubuğuna "cmd" ya da "komut istemi" yazılır ve sağ tıklanıp "yönetici olarak çalıştır" seçilir. (Resim 7)

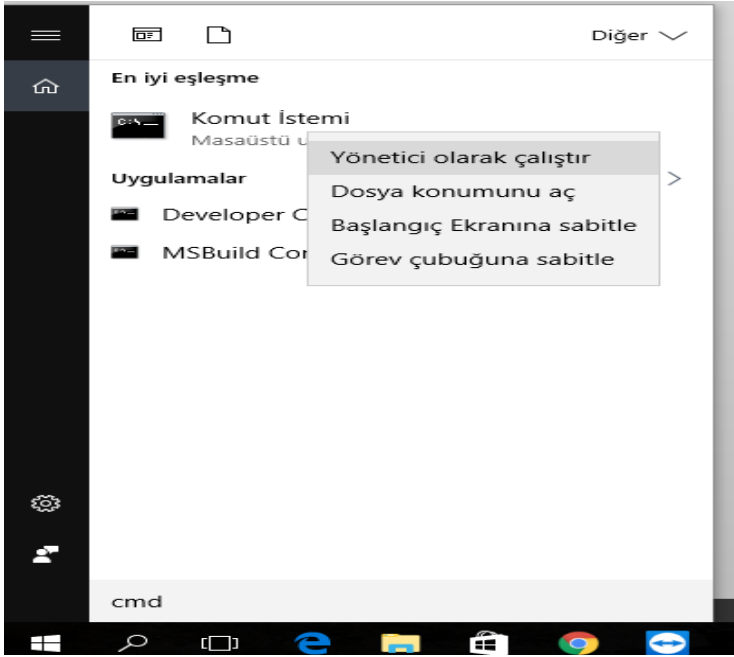


Resim7

- d- Cmd ekranına "regsvr32 C:\WebDicomViewer.ocx" yazılır .(Resim 8)

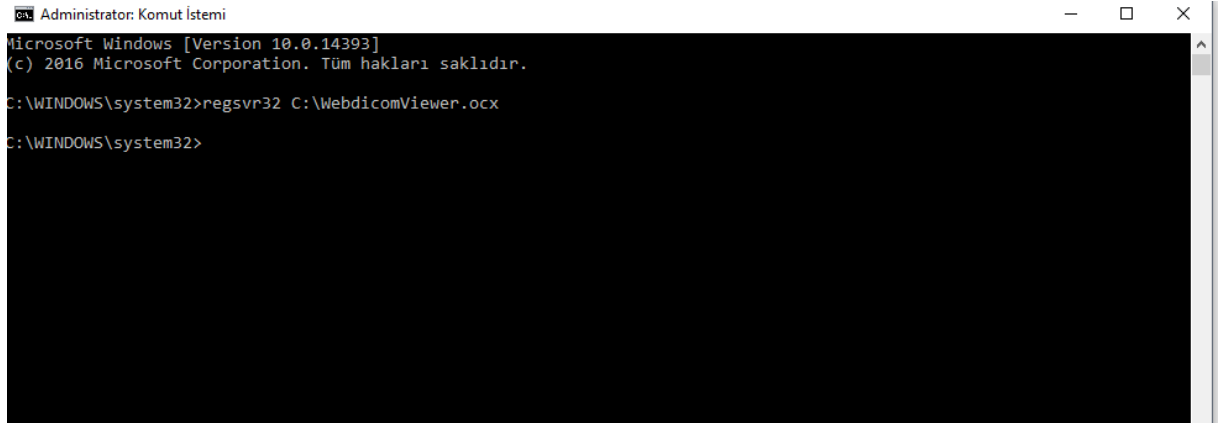

Resim 8

- e- İşlem başarılı olursa ekranda "DllRegisterServer Kayıt işlemi başarıyla gerçekleştirildi" uyarısı verecektir. Şimdi görüntülerin olduğu sayfaya gidelim.Görüntüsünü istediğimiz hasta kaydını üzerine gelip Yükle butonuna bastıktan sonra ietab eklentisine basıyoruz. (Resim9)

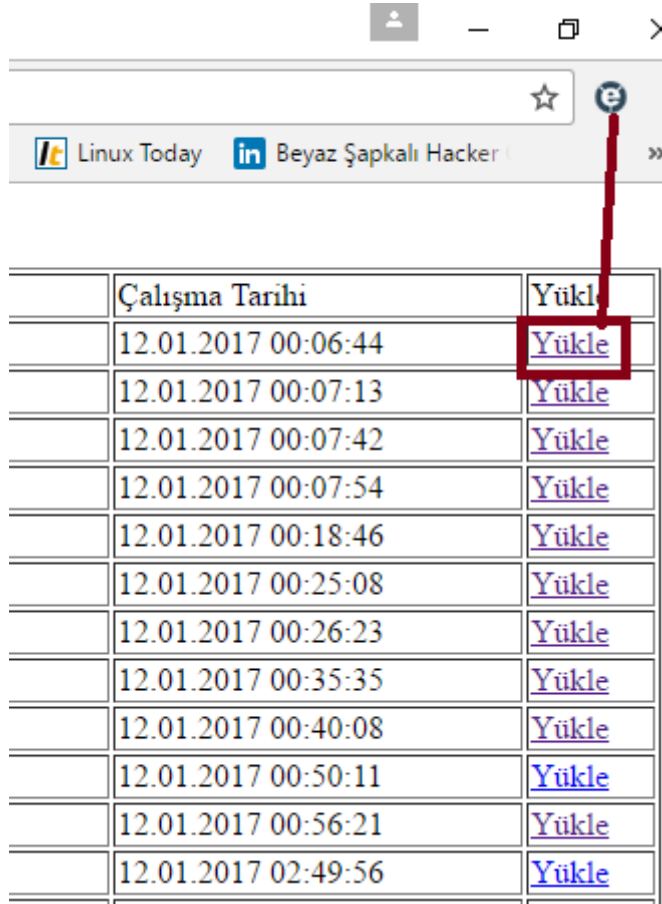


The image shows a web browser window with a table. The browser's address bar contains the text "Linux Today" and "Beyaz Şapkalı Hacker". The table has two columns: "Çalışma Tarihi" and "Yükle". The "Yükle" column contains a blue link labeled "Yükle" for each row. The first "Yükle" link is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the browser's address bar area.

Çalışma Tarihi	Yükle
12.01.2017 00:06:44	Yükle
12.01.2017 00:07:13	Yükle
12.01.2017 00:07:42	Yükle
12.01.2017 00:07:54	Yükle
12.01.2017 00:18:46	Yükle
12.01.2017 00:25:08	Yükle
12.01.2017 00:26:23	Yükle
12.01.2017 00:35:35	Yükle
12.01.2017 00:40:08	Yükle
12.01.2017 00:50:11	Yükle
12.01.2017 00:56:21	Yükle
12.01.2017 02:49:56	Yükle

Resim 9

f- Resim 10'da görüldüğü gibi görüntüler karşınıza gelecektir.

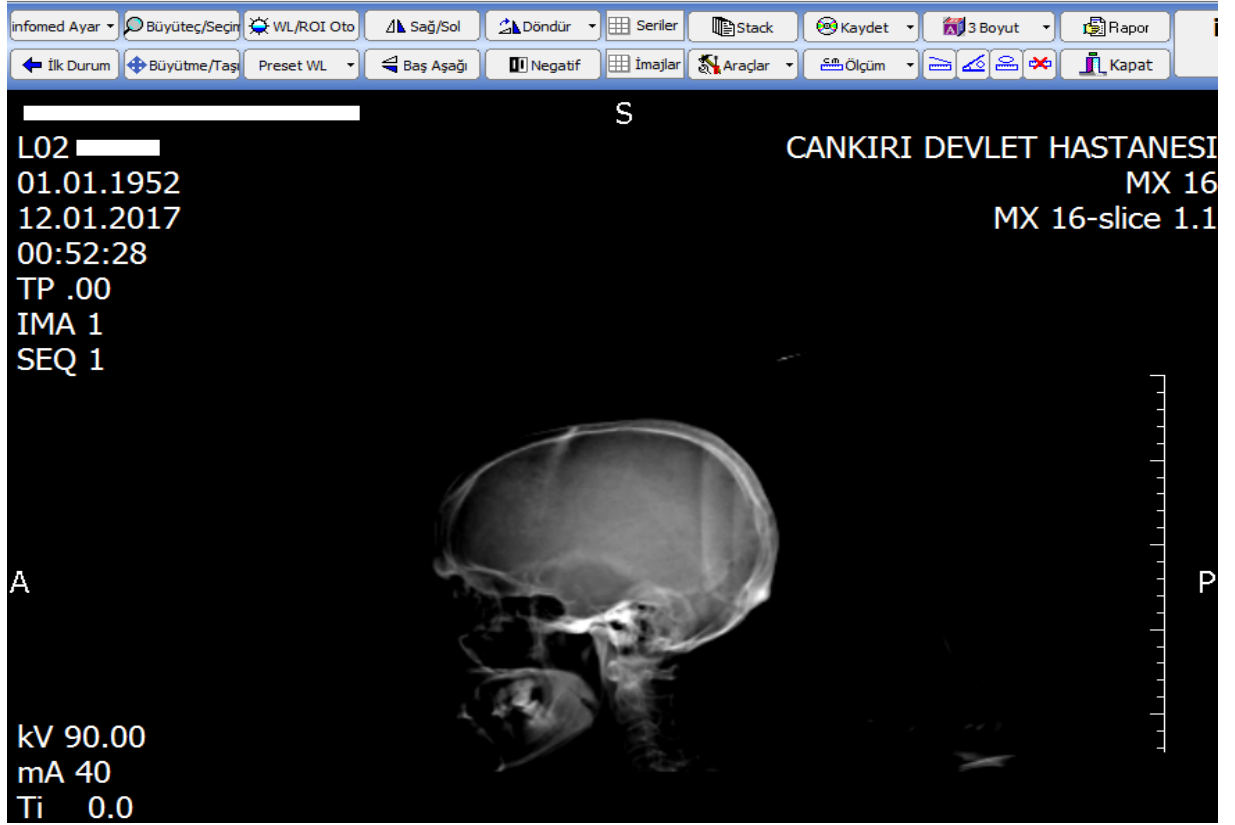

Resim -10